

DATASHEET

AmbuMan® SAM iQF on luotettava ja kustannustehokas harjoitusnukke, joka on suunniteltu täyttämään BLS-algoritmin koulutusvaatimukset.

Ja nyt uuden iQF-sovelluksen avulla voit tarjota laadukasta elvytyskoulutusta aikuisille, joilla on sydänpysähdys.


Elvytyksestä tulee tärkein tekijä, kun henkilö kärsii sydänpysähdyksestä

Sydänpysähdysten sattuessa verenkierto kehoon, aivoihin, keuhkoihin ja elimiin pysähtyy. Ilman hoitoa potilas kuolee. Rintakehän painalluksilla veri kiertää kehossa. Siksi on tärkeää, että ihmiset harjoittelevat elvytystä mahdollisimman realistisesti.

iQF: Koulutus, joka toimii

Auttaa elvytyskouluttajia ohjaajia. iQF-sovellus sisältää datapohjaista tietoa ja tarkkoja mittaustuloksia elvytyskoulutuksen tueksi.

Auta oppilaitasi oppimaan laadukasta elvytystä hausalla tavalla hyödyntäen mm. pelejä ja kilpailuja.

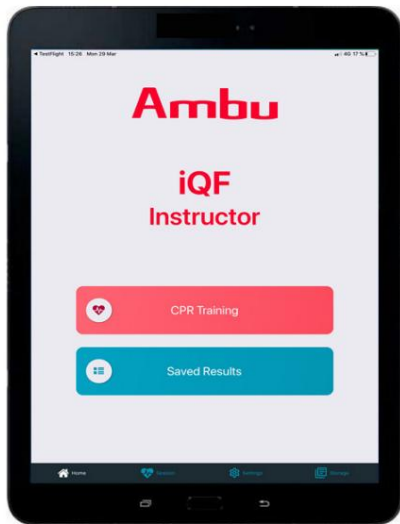

Ambu iQF -Instructor App

Realistinen ventilaatio- ja AED-koulutus

AmbuMan SAM iQF tarjoaa oppilaille realistisen ventilaatiokokemuksen. Oikeaa painelusyvyttä ja tarvittavaa ventilaatiotilavuutta voidaan seurata nukun palautenäytöllä.

Nukun yläkeho vastaa kaikkia tarkkoja anatomisia piirteitä, joiden avulla opiskelijat voivat oppia BLS-tekniikan täydellisesti. Tämä sisältää puoliautomaattisten defibrillaattorien (AED) käytön ja elektrodien sijoittelun.

Lisäksi ainutlaatuinen Ambu-hygieniajärjestelmä estää ristikontaminaation.

AmbuMan® SAM iQF



TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

- Kestävä ja luotettava kustannustehokas BLS-harjoitusnukke anatomisesti oikealla ylävartalolla.
- Nukun vartaloon sisäänrakennettu visuaalinen palaute antaa välittömän palautteen painelusyvytydestä.
- Ambu-hygieniajärjestelmä puhalluselvytykseen ja suusta nenään ventilaatioon.
- Helppo AED-koulutus

HARJOITTELE iQF:ää, HARJOITTELE ELÄMÄÄ VARTEN

Yksityiskohtainen visualisointi painelusyvytydestä ja oikeasta ventilaatiotilavuudesta ohjaajan ja harjoittelijan iQF-sovelluksen avulla. Toiminta Bluetooth®-yhteydellä.

Ambu

TEKNISET TIEDOT

Paino	4,5 kg
Pituus	45 cm
Leveys	37 cm
Korkeus	25 cm
Maks. ilmanvaihtotilavuus	1800 ml
Suurin painelussyvyys	7 cm

MATERIAALIT

Perusyksikkö	ABS (akrylonitriilibutadieenistyreeni)
Pää	Polyvinyylikloridi, kova
Rintakehän iho	Polyvinyylikloridi, pehmeä
Kasvokappale	Polyvinyylikloridi, pehmeä
Pääpussi, kertakäyttöinen	Polyeteeni
Harjoituspuku	Polyesteri
Kantolaukku	PVC-päällysteinen nailon

Tarvikkeiden tuotetiedot


Tuotenro.

A268010000	AmbuMan SAM iQF, jossa 25 pääpussia ja yksi kasvo-osa, toimitetaan pehmeässä kantolaukussa
234 000 702	Pääpussit (100 kpl:n sarjat)
234 000 703	Kasvosuoja (5 kpl:n sarja)


* Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.



Hygieniajärjestelmä

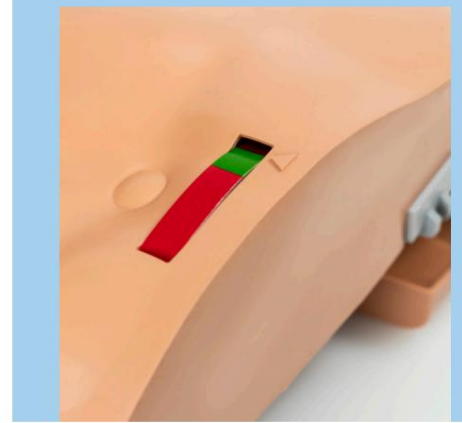

Painelu syvyyden ilmaisin

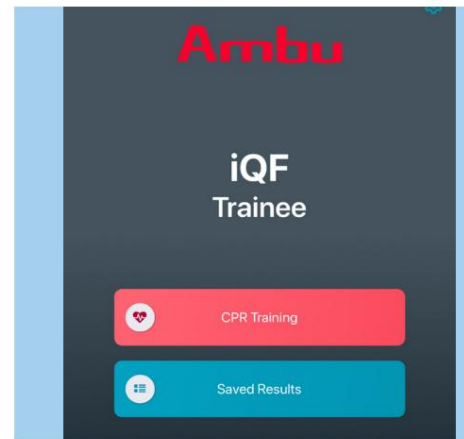

Ambu iQF -Trainee App

Ambu

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Tanska
Puh. +45 72 25 20 00
Faksi +45 72 25 20 50
ambu.com